

parkell today

BIOACTIVE EDITION

Predicta® BIOACTIVE

bulk-fill

core build-up

desensitizer

*Vorhersagbare
Remineralisation für bessere
Ergebnisse am Patienten*




MADE IN
USA

Dual-härtender Komposit für Stumpfaufbau und Wurzelstiftzementierung

Geeignet für großflächige Stumpfaufbauten mit oder ohne vorangehende Zementierung eines Wurzelkanalstiftes.

Predicta® Core ist bioaktiv. Das Material gibt Calcium-, Phosphat- und Flouridionen ab. Durch deren Freisetzung die Mineral-Apatit Bildung stimuliert und die Remineralisierung am Übergang von Restauration und Zahn begünstigt wird.

- ▶ Dual-härtend für unbegrenzte Aushärtungstiefe
- ▶ Zusatz von Zirkonoxid für hohe Dimensionsstabilität und eine zahnähnliche Beschleifbarkeit
- ▶ hohe Druck- und Biegefestigkeit zur Aufnahme von Kronen
- ▶ hohe Röntgenopazität
- ▶ bioaktiv durch Abgabe von Calcium-, Phosphat- und Flouridionen
- ▶ Erhältlich in unterschiedliche Viskositäten
- ▶ Indiziert für Stumpfaufbauten und zur Befestigung von Wurzelstiften

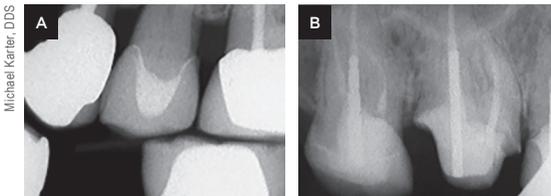

(A) Tooth #13 – A void-free Predicta® Core provides strength and support for an e.max crown. (B) Tooth #3 – Post cementation and core build up accomplished with Predicta® Bioactive Core.

ITEM #	PRODUCT
S600	Flowable - White Shade
S601	Flowable - Tooth Shade
S605	Stackable - White Shade
S606	Stackable - Tooth Shade

Predicta® Bioactive Core Build-Up Kits

Include (1) 5 ml hand-held syringe, (10) 17-gauge mixing tips and (10) 19-gauge mixing tips

Accessories & Refills

S620	5 ml Dispensing Gun
S621	17-Gauge Dispensing Tip Refill (30 pcs)
S622	19-Gauge Dispensing Tip Refill (30 pcs)






Universeller, dual-härtender Komposit für alle Bereiche der konservierenden Zahnheilkunde

Das dual-härtende Material bietet die Möglichkeit des einfachen und schnellen Einbringens der gesamten Kunststoffmenge – ohne zusätzliches Lichthärten.

Predicta® Bioactive Bulk ist bioaktiv. Das Material gibt Calcium-, Phosphat- und Fluoridionen ab. Durch deren Freisetzung die Mineral-Apatit Bildung stimuliert und die Remineralisierung am Übergang von Restauration und Zahn begünstigt wird.

- ▶ Dual-härtender, bioaktiver Komposit
- ▶ Bei Schichtstärken von ca. 4 mm entfällt eine schrittweise Polymerisation
- ▶ Natürliche Ästhetik durch erhöhte Fluoreszenz
- ▶ Ideale Viskosität für eine optimale Randanpassung
- ▶ Hohe Röntgenopazität
- ▶ Gute Verschleißfestigkeit durch Nanofüller
- ▶ Sehr gute Polierbarkeit
- ▶ Indiziert für alle Restaurationen der Klassen I - V und für Milchzahnfüllungen
- ▶ Nanobybrid

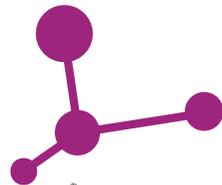

Bioaktive dentale Restaurationsmaterialien empfinden die chemischen und physikalischen Eigenschaften des natürlichen Zahnes durch eine ionisch vernetzte Kunststoffmatrix nach.



ART. PRODUKTBESCHREIBUNG

ART.	PRODUKTBESCHREIBUNG	
S615	Bulk-Fill - A1/B1	Ein Set enthält: 5 ml Spritze (9,25g), 17 Gauge Mischkanülen (20 Stück)
S616	Bulk-Fill - A2/B2	
S610	Bulk-Fill (LV) - A1/B1	
S611	Bulk-Fill (LV) - A2/B2	

Zubehör

S621	17 Gauge Mischkanülen (30 Stück)
S622	19 Gauge Mischkanülen (30 Stück)

Predicta® desensitizer

BIOACTIVE

Der bisher einzige bioaktive Desensitizer

Der neue Predicta® Desensitizer macht es möglich eine Dentinüberempfindlichkeit mit Hilfe von im Zahn natürlich vorkommenden Mineralien zu behandeln.

Die gelartige Substanz enthält Calcium und Phosphationen in Form von Hydroxylapatit. Diese verschließen die offenen Dentintubuli. Durch die stetige Bildung von Calcium und Phosphationen kann eine weitere Remineralisation stattfinden.


Der Predicta® Desensitizer gilt als ausgesprochen biokompatibel, da er keine Methacrylate enthält und bei der Herstellung vollständig auf Chemikalien, die Weichgewebe reizen, verzichtet wurde.

Ursache von Dentinüberempfindlichkeit:


- ▶ freilegende Zahnhäule
- ▶ freiliegende Wurzeloberflächen nach PA-Chirurgie
- ▶ Zustand nach Scaling oder root planning im Rahmen einer PA-Therapie
- ▶ Bleaching

Anwendung:

Das Gel wird in einer Spritze geliefert, es erfordert kein zusätzliches Mischen. Entfernen Sie Zahnstein und Plaque von der zu behandelnden Stelle, tupfen Sie den Bereich mit einer Baumwollrolle oder Gaze trocken und tragen Sie das Gel direkt auf. Dieser Vorgang kann in mehreren Sitzungen wiederholt werden.

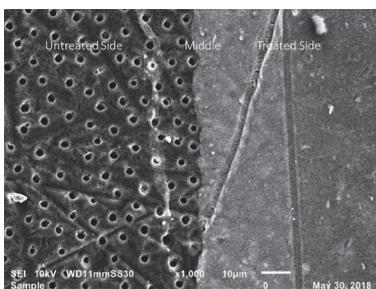

Unbehandelte offene Dentintubuli (links) und Zahnoberfläche, die mit Predicta® Bioaktive Desensitizer behandelt wurde (rechts). (Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Alireza Sadr, PhD, University of Washington School of Dentistry)

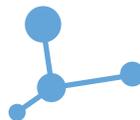

ART. PRODUKTBESCHREIBUNG

ART.	PRODUKTBESCHREIBUNG	
S626	Predicta® Bioaktive Desensitizer Single Syringe Kit 3 ml Spritze, Mischkanülen (10 Stück), Microbrush (15 Stück)	Predicta® Bioaktive Desensitizer Sæt
S625	Predicta® Bioaktive Desensitizer Kit 3 ml Spritze (3 Stück), Mischkanülen (30 Stück), Microbrush (50 Stück)	

ZUBEHÖR & NACHFÜLLPACKUNGEN

S390	Mischkanülen (30 Stück)
S391	Microbrush - fein (200 stück)

Was Kliniker über Predicta® sagen



“Unsere Zahnarztpraxis ist mehr und mehr begeistert von Predicta Bulk. Ich denke Parkell hat ein ausgezeichnetes Material auf den Markt gebracht. Wir finden es gut, dass das Material chemisch härtet, sodass wir sicher sein können, dass es vollständig ausgehärtet ist, sogar bei dickeren Materialschichten. Andere Bulk Materialien haben eine eingeschränkte Aushärtetiefe. Die Farbübereinstimmung ist überraschend gut, das hätte ich nicht erwartet.”

Dr. Manouchehr Kiaei, DDS - Sweden



“Unser Ziel ist es Abläufe zu vereinfachen und den Materialeinsatz zu begrenzen. Predicta Core verbindet genau diese Anforderungen mit den Bedürfnissen der Patienten, deren Anspruch eine hohe Qualität bei gleichzeitiger schnell zu realisierender Versorgung ist.”

Dr. Giuseppe Chiodera, Styleitaliano Honorary Member

QR Code scannen für die vollständige Produktbewertung (auf Englisch)



Das Material ist sehr effektiv, es funktioniert sehr gut, setzt sofort die Empfindlichkeit für mehrere Tage herab und reduziert mit einer zweiten Anwendung die Empfindlichkeit auf lange Sicht nachweislich. “

Dr. Consuelo Sanavia - Italien



“Besser geht`s nicht!” Dr. Lester bietet Predicta Bioactive Desensitizer mittlerweile als Standard Behandlung bei Patienten mit Dentinüberempfindlichkeit an. “Die Reduzierung oder sogar Eliminierung von Beschwerden ist ein wichtiger Faktor für meine Patienten. Dieses Produkt hat es in sich!”

Dr. Helen K. Lester, DDS, FAGD, AFAAID - USA

QR Code scannen für die vollständige Produktbewertung (auf Englisch)



“Der Desensitizer hat uns von Anfang an beeindruckt. Die gelartige Konsistenz ermöglicht ein präzises Auftragen. Die kontrastreiche Farbe macht es zudem einfach das Material auf der zu behandelnden Oberfläche vom Zahn zu unterscheiden. Der Desensitizer verträgt sich mit Kompositmaterialien.”

Prof. Loris Prosper und Dr. Tiziano Galizzi - Italien



Hören Sie sich an, wie Dr. Sherri Lukes die vielen Vorteile der Verwendung von Predicta Bioactive Desensitizer für Patient und Behandler erklärt.

QR Code scannen, um das Video anzusehen (Deutsch)

