

# parkell today

BIOACTIVE EDITION

## Predicta<sup>®</sup> BIOACTIVE

bulk-fill

core build-up

desensitizer

*Stimuler la reminéralisation pour  
de meilleurs résultats clinique*




Produits disponibles chez les principaux distributeurs.  
Parkell est le fabricant par définition du MOD98/42/CEE.  
Produits mentionnés de classe II.a

## Composite à prise duale pour la reconstitution de moignons et le collage des tenons

Solution optimisée pour la reconstitution du faux moignon sur des dents délabrées avec ou sans tenon en amont de la préparation, l’empreinte, la fabrication et le scellement de la couronne.

- ▶ **Predicta® Bioactive Core est un matériau bioactif. Il libère des ions calcium et phosphate et libère et se recharge en ions fluorure pour stimuler la formation d’hydroxyapatite et la reminéralisation à l’interface matériau-dent**
- ▶ Polymérisation duale pour une profondeur de polymérisation illimitée
- ▶ Ajout de zircone pour améliorer la préparation
- ▶ Indiqué pour la reconstitution du moignon dentaire et le collage des tenons
- ▶ Support solide et stable pour les couronnes en zircone, porcelaine, CCM et métal
- ▶ Multiple viscosités
- ▶ Hautement radio-opaque

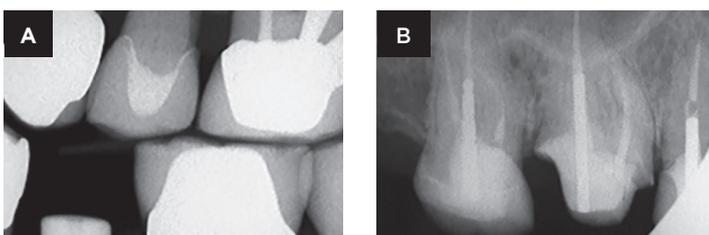

*(A) Tooth #25— Noter sur la 25 l’absence de vide entre la dent le Predicta Core qui assure force et soutien avant la mise en place d’une couronne en e.max. (B) Reconstitution corono radiculaire sur 16 réalisée en un seul temps avec le Predicta Core. Notez la radio-opacité du matériau.  
 (Michael Karter, DDS)*



### REF. DESCRIPTION PRODUIT

REF.	DESCRIPTION PRODUIT
S600	Flowable - Blanc
S601	Flowable - Dent
S605	Stackable - Blanc
S606	Stackable - Dent

**Predicta® Bioactive Core Build-Up Kits**  
 Les kits comprennent 1 seringue de 5 ml (9,25 g), 10 embouts applicateurs de calibre 17 et 10 embouts applicateurs de calibre 19 (recharges disponibles).

### Accessoires disponibles

S621	17-Gauge Embouts applicateurs (30 pcs)
S622	19-Gauge Embouts applicateurs (30 pcs)

## Composite universel à prise duale pour toutes vos restaurations


Un composite à prise duale qui peut être utilisé pour la restauration de toutes les cavités, quelle que soit leur taille, en un seul incrément. Il n'est donc pas nécessaire de procéder par apport de couches successives.

- ▶ **Predicta® Bioactive Bulk est un matériau bioactif. Il libère des ions calcium et phosphate et libère et se recharge en ions fluorure pour stimuler la formation d'hydroxyapatite et la reminéralisation à l'interface matériau-dent.**
- ▶ Polymérisation à prise duale pour une profondeur de polymérisation illimitée
- ▶ Fluorescence - pour une apparence plus naturelle
- ▶ Viscosités et teintes multiples
- ▶ Hautement radio-opaque
- ▶ Indiqué pour les restaurations de Classe I, II, III, IV et V
- ▶ Solide et durable pour résister aux forces occlusales
- ▶ Hautement polissable
- ▶ Polyvalence des composites constitués de charges nanohybrides



**La bioactivité** est reconnue dans le domaine dentaire pour renforcer les liaisons chimiques entre la restauration et la dent, permettre une meilleure pénétration du matériau et ainsi combler les micro-espaces, réduire la sensibilité dentaire, éviter les caries secondaires et augmente l'étanchéité au niveau des anfractuosités marginales des restaurations pour prévenir les microfuites bactériennes.

### Formation de l'apatite minérale

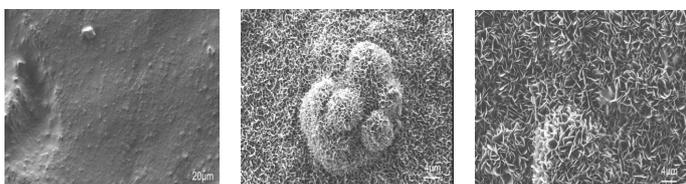

Gauche : Témoin de Predicta sans SBF (fluide corporel simulé). Centre : Predicta, 7 jours en SBF. Droite : Predicta, 28 jours en SBF. Images au MEB Université de Uppsala, Suède.

#### REF. DESCRIPTION PRODUIT

REF.	DESCRIPTION PRODUIT	
S615	Bulk-Fill - A1/B1 Shade	<b>Predicta® Bioactive Bulk-Fill Kits</b> Les kits comprennent 1 seringue de 5 ml (9,25 g) et 20 embouts jetables de calibre 17.
S616	Bulk-Fill - A2/B2 Shade	
S610	Bulk-Fill (LV) - A1/B1 Shade	
S611	Bulk-Fill (LV) - A2/B2 Shade	

#### Accessories & Refills

S621	17-Gauge embouts (30 pcs)
S622	19-Gauge embouts (30 pcs)



## Le gel désensibilisant bioactif

Predicta<sup>®</sup>Bioactive Desensitizer modifie la manière de traiter l'hypersensibilité dentinaire par les praticiens en utilisant les ions qui se trouvent naturellement dans la dent (calcium et phosphate) et en les restituant sous forme de précipités d'hydroxyapatite qui bloquent rapidement les tubules ouverts. Ensuite, à mesure que les ions calcium et phosphate continuent à se libérer, une minéralisation se produit pour sceller davantage les tubules.


Predicta Bioactive Desensitizer est également hautement biocompatible, car aucun méthacrylate ou produit chimique irritant pour les tissus mous n'est utilisé lors de sa fabrication.

### Traite l'hypersensibilité de la dentine due à :


- ▶ Des racines exposées après une chirurgie parodontale
- ▶ Procédures d'éclaircissement dentaire
- ▶ Détartrage ou surfaçage radiculaire
- ▶ Hypersensibilité due à la récession gingivale

### Facile à utiliser, facile à appliquer!

Ce gel distribué par seringue ne nécessite aucun mélange. Il suffit d'éliminer le tartre ou la plaque dentaire du site de traitement, d'assécher la zone avec un rouleau de coton ou une compresse de gaze et le tour est joué.

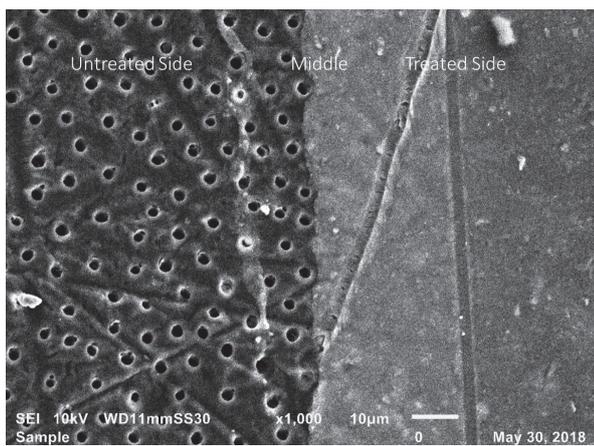

Comparaison de tubules dentinaires non traités (droite), avec des tubules qui ont été recouverts d'une couche dense de désensibilisateur bioactif Predicta<sup>®</sup> (gauche). Image reproduite avec l'aimable autorisation de la faculté de médecine dentaire de l'Université de Washington.

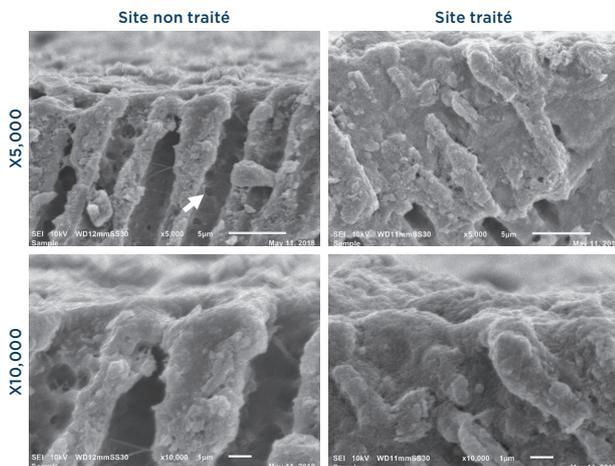

Images SEM en coupe transversale. Notez la perméabilité des tubules dentinaires et des orifices de branche latérale ouverts (flèche) qui ont été bien scellés du côté traité. (Image reproduite avec l'aimable autorisation de l'Université de Washington School of Dentistry).

ITEM #	PRODUCT	
S626	<b>Single Syringe Kit</b> (1) 3 ml syringe, (10) applicator tips, (15) applicator brushes, (1) mixing well	<b>Predicta<sup>®</sup> Bioactive Desensitizer Kits</b>
S625	<b>Three Syringe Kit</b> (3) 3 ml syringes, (30) applicator tips, (50) applicator brushes, (1) mixing well	

#### Accessories & Refills

S390	<b>Dispensing Tip (Pre-Bent/Yellow) Refill</b> (30 pcs)
S391	<b>Fine (1.5mm) Micro Brush Applicator Refill</b> (100 pcs)



# Ce que les praticiens disent de Predicta® Bioactive



“Notre cabinet dentaire est de plus en plus satisfait de Predicta Bulk. Je pense que Parkell a mis au point un excellent produit. Nous apprécions le fait qu’il soit polymérisé chimiquement, ce qui nous permet de savoir qu’il endure sur toute la ligne, même si on utilise une couche épaisse. Les autres produits bulk ont une profondeur de polymérisation limitée. La correspondance des couleurs est étonnamment bonne, je ne m’y attendais pas. “

*Dr. Manouchehr Kiaei, DDS - Suède*



“Predicta Desensitizer est très efficace, il fonctionne très bien immédiatement en bloquant la sensibilité pendant plusieurs jours et avec une deuxième application il réduit aussi à long terme. “

*Dr. Consuelo Sanavia, Dental Hygienist - Italie*



“Notre objectif est toujours de simplifier la procédure et de limiter l’utilisation de matériaux. Predicta Core répond à ces besoins ainsi qu’à ceux de nos patients, qui souhaitent des restaurations rapides et de haute qualité.”

*Dr. Giuseppe Chiodera, Styleitaliano Honorary Member, Italie*

**Scanner le code pour une évaluation complète du produit**



“Predicta Desensitizer nous a impressionnés dès la première utilisation. Les caractéristiques qui nous ont enthousiasmés sont la compatibilité avec les systèmes d’adhésifs, la formulation en gel pour une application facile, et la couleur qui permet de le rendre bien visible sur les surfaces à traiter pour une application précise.”

*Prof. Loris Prosper, DDS et Dr. Tiziano Galizzi, DDS - Italie*



Dans un récent épisode de l’émission Product Talk d’Inside Dentistry, **Dr Jason Olitsky**, USA partage son expérience de l’utilisation de Predicta® Bioactive Bulk et parle de la facilité d’utilisation, de l’esthétique et des avantages de la bioactivité.



**Scanner le code pour voir la video (anglais)**



Écoutez **Dr. Sherri Lukes**, USA, parler des multiples avantages de l’utilisation du désensibilisant bioactif Predicta® pour le patient et le praticien.



**Scanner le code pour voir la video (texte français)**



Jetez un coup d’œil à cet article du Dental Product Shopper, qui présente le **Dr Cavanaugh**, USA un des premiers utilisateurs de Predicta® Bioactive Core qui, après un an d’utilisation, n’a eu que du succès avec ce produit.



**Scanner le code pour lire l’article (anglais)**